

Руководство пользователя

Данное руководство пользователя считается также сертификатом соответствия качества. Будьте внимательнее при его хранении.

BeautyLife

Beauty & Health Care

НК-1004

Красота и система оздоровления



 ООО Нью Лайф Медикал

Приветствие

Компания «НК Ко Лтд» основана в 1993 г. Обладая высоким потенциалом в области производства и совершенной технологией, компания поставляет свои изделия в внутри Кореи, а также осуществляет свои поставки в зарубежные страны. Компания успешно работает в области домашней медтехники. Президент компании «НК Ко Лтд» и его команда поставили перед собой цель-стать главным центром на мировом рынке медтехники. Для этого компания использует новейшие достижения в области медицины и техники, но при этом не забывает о традициях корейского народа. В данный момент компания НК Ко Лтд активно продвигает свою продукцию на российский рынок.

С помощью развития медицинской науки мы смогли достичь своей мечты- продлить среднюю продолжительность жизни человека, однако при этом всегда находились в поисках основных причин заболеваний и методов профилактики, в этой связи наша команда лаборантов научно-исследовательского института, базируясь на явлениях природы, поставила перед собой задачу найти «силу самоисцеления» и разработать совершенный медицинский прибор. Длительное время команда выполняла исследовательскую и экспериментальную работу, в результате которых смогла разработать нанотехнологию, синтезируя понятие “улучшение конституции организма человека” из корейской традиционной медицины и самую передовую технологию из западной медицины, что максимально увеличила анионы и улучшила проницаемость длинноволнового инфракрасного излучения в медицинских приборах.

Ли Дже Бонг, Генеральный директор НК Ко Лтд

Содержание

BeautyLife
Beauty & Health Care

НК-1004

Красота и система оздоровления

- 01 | Титульный лист
- 02 | Приветствие
- 03 | Содержание
- 04 | Фотография продукции
- 05 | Конфигурация продукта
- 06 | Устройство и функции продукта
- 07 | Применение ультразвука
Инструкция по применению ультразвука и меры предосторожности
- 08 | Способ и порядок применения низкочастотных волн
- 09 | Инструкция по применению низкочастотных волн и порядок применения.
- 11 | Технические характеристики и маркировка
- 13 | Меры предосторожности
- 14 | Медицинская лицензия Свидетельство
- 15 | Гарантия качества



BeautyLife

Beauty & Health Care

НК-1004
Красота и система оздоровления



Конфигурация продукта



Корпус



Подставка



зонд ультразвуковой



накладки кольцевидные
3D – TENS



подстилки под стопы



Накладки для рук



Брюшная накладка
(CH2)



накладки плечевые
(опция/CH-1)



Накладки простые
(опция/CH-1)



интимная
накладка



Низкочастотная
Лицевая лента

Устройство и функции продукта



NO	Название	Функция
1	Гнездо	Функция
2	Кнопка питания	Подключение кабеля питания
3	Действие кольцевидных накладок 3Dtens. Время работы.	Отображение продолжительности работы от установленного времени (30 мин) до окончания (00)
4	Подстилки под стопы (CH1) Действие и время.	Отображение продолжительности работы от установленного времени (30 мин) до окончания (00)
5	Брюшная накладка (CH2) Действие и время.	Отображение продолжительности работы от установленного времени (30 мин) до окончания (00)
6	Действие ультразвуковых волн. Время работы.	Отображение продолжительности работы от установленного времени (15 мин) до окончания (00)
7	Действие кольцевидных накладок 3Dtens режиме №1	Мощность работы в режиме №1
8	Действие кольцевидных накладок 3Dtensv режиме №2	Мощность работы в режиме №2
9	Действие кольцевидных накладок 3Dtensv режиме №3	Мощность работы в режиме №3
10	Регулятор действия кольцевидных накладок 3Dtens	Включает/выключает низкие частоты, а также регулирует мощность действия
11	Регулятор действия подстилок под стопы (CH1)	Включает/выключает низкие частоты, а также регулирует мощность действия
12	Регулятор действия брюшной накладки (CH2)	Включает/выключает низкие частоты, а также регулирует мощность действия
13	Регулятор действия ультразвуковых волн	Включает/выключает ультразвуковые волны, а также регулирует мощность действия
14	Разъем для кольцевидных накладок 3Dtens (-/серый цвет)	Разъем для подсоединения низких частот
15	Разъем для кольцевидных накладок 3Dtens (+/красный цвет)	Разъем для подсоединения низких частот
16	Разъем для кольцевидных накладок 3Dtens (-/серый цвет)	Разъем для подсоединения низких частот
17	Разъем для подстилок под стопы (CH1)	Разъем для подсоединения низких частот
18	Разъем для брюшной накладки (CH2)	Разъем для подсоединения низких частот
19	Разъем для ультразвуковых волн	Разъем для подключения ультразвукового зонда
20	Корпус	Содержит регуляторы и внутренние детали

Способ применения ультразвука

Порядок применения

1. Подключите шнур питания к розетке
2. Подключите ультразвуковой зонд к корпусу
3. Нажмите на кнопку питания. Отобразится время 00
4. При нажатии на кнопку «ультразвук» отобразится время: 15мин, после звукового сигнала устройство начнет работу
5. Нанесите на ультразвуковой зонд достаточное количество геля, после чего установите среднюю мощность ультразвукового излучения.
 - 1) Для регулировки поверните регулятор вправо для повышения уровня и влево для понижения.
 - 2) Если в процессе работы необходимо отключить устройство, нажмите на регулятор, что приведет к прекращению работы.
 - 3) Из существующих уровней излучения от 1 до 10, рекомендуется использовать не выше 5.
 - 4) Завершение работы: при установке таймера на 15 минут, по истечению времени работа завершается автоматически

Порядок применения


- При применении массажера на коже рекомендуется соприкосновение с кожей в вертикальном положении при скорости движения 4-5см в секунду, что способствует глубокому воздействию.
- 1) Применение геля во время использования массажера усиливает эффект
 - 2) Гель заполняет пространство между поверхностью кожи и устройством, что усиливает воздействие ультразвука, а также способствует более комфортному передвижению головки устройства
 - 3) Если во время работы устройства вы чувствуете, то вам горячо, добавьте гель или уменьшите уровень мощности.
 - 4) Если вы чувствуете боль во время работы устройства, уменьшите уровень мощности.
 - 5) После использования очистите головку устройства от геля мягкой салфеткой или полотенцем.

Инструкция по применению ультразвука и меры предосторожности

Инструкция по применению


1. Не применять устройство на одном участке тела более 15 минут и чаще 1 раза в течение 5-ти часов.
2. После работы устройства в течении 15 минут, повторное использование рекомендуется только спустя 10 минут, во избежание перегрева.
3. Если устройство не используется, не оставляйте его включенным во избежание перегрева, что может послужить причиной поломки зонда или основного корпуса (в данном случае гарантийный ремонт не действует)
4. Если вы ощущаете чрезмерное нагревание во время использования, обратитесь к дилеру для проверки устройства
5. Для предотвращения ожогов не задерживайте зонд на одном участке, постоянно передвигая его.
6. Срок службы деталей зависит от условий использования. При соблюдении правил и мер предосторожностей, устройство может работать в течение нескольких лет, сохраняя мощность и эффективность. Также срок службы зависит от длительности и уровня мощности при работе с устройством.

Способ применения ультразвука на различных частях тела

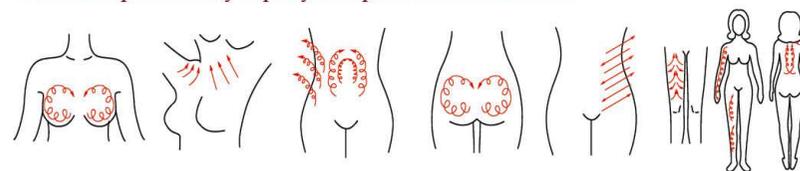


Инструкция по применению низкочастотных волн и порядок применения


1. Подключите шнур питания к розетке
2. Подсоедините шнур питания к основному корпусу
3. Нажмите на кнопку питания- отобразится время-00
4. Пояс: Обработайте область кожи, на которой будет применяться устройство, наденьте пояс и подсоедините к основному корпусу, Гелиевые наклейки: очистите область кожи, на которой будут применяться наклейки, снимите защитную пленку с поверхности накладок, приложите гелиевые наклейки и подключите кабели к основному корпусу.
5. Для начал работы низкочастотных волн нажмите на кнопку регулировки, отобразится время – 30 мин. После звукового сигнала устройство начнет работу.
6. Установите уровень мощности низкочастотных волн (уровни от 1 до 10).
 - 1) Для регулировки поверните регулятор вправо для повышения уровня и влево для понижения
 - 2) Если в процессе работы необходимо отключить устройство, нажмите на переключатель, что приведет к прекращению работы
7. Завершение работы: при установке таймера на 30 минут, по истечению времени работа завершается автоматически.
8. После прекращения работы снимите ремень/наклейки
 - 1) Не применяйте устройство на одной области более 30 минут
 - 2) Гелиевые и другие низкочастотные наклейки могут применяться 2-30 раз в зависимости от условий, при которых они используются.
 - 3) После использования гелиевых накладок приклейте защитную пленку и положите в чехол во избежание попадания воздуха.
 - 4) После использования протрите пояс мягкой салфеткой.
 - 5) Для более эффективной работы пояса рекомендуется смазать соединяющие кабелгелем
9. Применение устройств на различных частях тела:

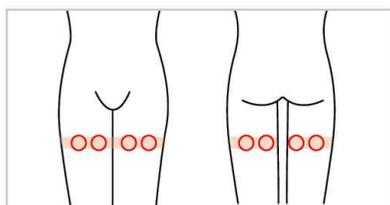


대퇴부의 경우

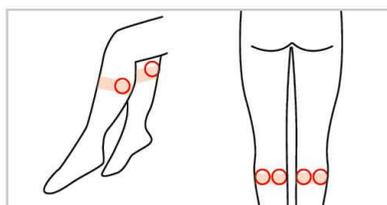

종아리의 경우

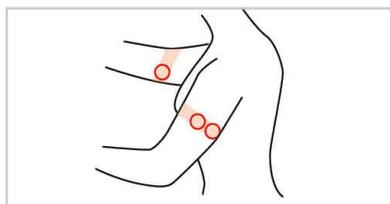

팔의 경우

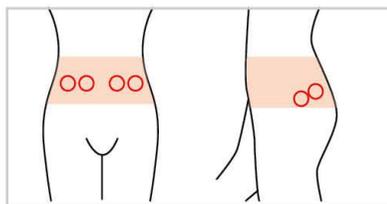


복부의 경우

Инструкция по применению кольцевидных накладок 3D-TENS Порядок применения

1. Подключите шнур питания к розетке
2. Подсоедините кольцевидные наклейки к основному корпусу
 - 1) Подсоедините кабель в средний разъем (+/красный цвет)
 - 2) Подсоедините кабели в правый и левый разъемы(-/серый цвет)
3. Нажмите на кнопку питания – отобразится время 00
4. Очистите участок кожи, на котором будет применяться устройство и приложите кольцевидные наклейки к телу. Важно! Наклейки со знаком «+» и знаком «-» должны располагаться поочередно. Расположение накладок с одинаковыми показателями рядом недопустимо.
5. Нажмите на регулятор питания – отобразится время «30 мин», после звукового сигнала устройство начнет работу
6. Установите подходящий уровень мощности (помните, что высокая мощность- не показатель высокой эффективности)
 - 1) Для регулировки поверните регулятор вправо для повышения уровня и влево для понижения
 - 2) Если в процессе работы необходимо отключить устройство, нажмите на регулятор, что приведет к прекращению работы
7. Завершение работы: при установке таймера на 15 минут, по истечению времени работа завершается автоматически.
8. По окончании работы снимите кольцевидные наклейки
 - 1) Не используйте наклейки на одном участке кожи более 30 минут
 - 2) Изнашивание и срок службы накладок зависит от условий использования
 - 3) Если вы чувствуете чрезмерное нагревание во время работы устройства, уменьшите мощность

● Способ применения ультразвука на различных частях тела

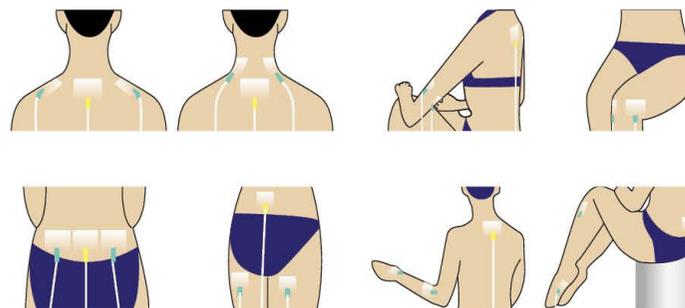



Технические характеристики и маркировка

1. Наименование: медицинское оборудование
(уровень расхода электроэнергии - 2)
2. Марка: Бьютилайф
3. Модель: HK-1004
4. Разрешение: No제허13-1685호
5. Напряжение: AC 220V 60Hz 45VA
6. Возможности:
 - 1) Ультразвуковые волны
 - Эл.напряжение и частота: AC 220V 50/60 Hz
 - Потребляемая мощность: 45VA
 - Тип и степень защиты от эл. Тока: устройство класса№1, тип BF
 - Частота ультразвукового излучения: 1.2MHz
 - Мощность ультразвукового излучения (зонд): 12W
 - Вид ультразвукового излучения: непрерывное излучение
 - Максимальное время использования ультразвука: 15 мин
 - Мощность ультразвуковой системы: 37.5W
 - Мощность: 3 W/cm²
 - Зона излучения: 5.3cm²
 - Звуковая мощность: 100mw/cm²
 - 2) Низкочастотное излучение
 - a) Кольцевидные накладки 3D TENS
 - Частота излучения: переменная частота 2~250Hz
 - Выходной ток: M1:13mA, M2:5mA, M3:21mA
 - Таймер: 30 минут
 - b) Низкочастотные устройства (CH1, CH2)
 - Частота излучения: 1000Hz, 2500Hz
 - Выходной ток: 22mA
 - Таймер: 30 минут
7. Безопасность
 - a) Низкочастотные волны
 - (1) Установите время (30 минут ± 10%), по истечению времени раздастся звуковой сигнал, после чего работа прекращается.
 - (2) Выходной ток не превышает следующих показаний:
Кольцевидные накладки 3DTENS :M1:13mA, M2:5mA, M3:21mA
Канал 1 : 22mA
Канал 2 : 22mA
 - (3) Запуск с нуля: после завершения работы отобразится время – “ZERO”
 - b) Ультразвуковое излучение
 - (1) Установите время (15 минут ± 10%), по истечению времени раздастся звуковой сигнал, после чего работа прекращается.
 - (2) Запуск с нуля: после завершения работы отобразится время – “ZERO”
8. Тип и степень защиты от эл. Тока: устройство класса№1, тип BF
9. Вес и упаковочная единица: 5.37KG / комплект
10. Принцип работы
Шнур питания устройства работает при номинальном напряжении 220V 50Hz/ 60Hz, что разрешено в коммерческих целях. Нажатие на кнопку питания приводит в работу пьезоэлектрические излучатели и центральный процессор. Ультразвуковое излучение зависит от вибрации пластины и явления обратного пьезоэлектрического эффекта. Нажатие на кнопку питания приводит в работу магнитострикционные излучатели и центральный процессор. Низкочастотное излучение зависит от магнитострикционных излучателей.






Меры предосторожности

- 1) Подготовка к использованию
 - (1) Не задерживайте долго на одном участке кожи ультразвуковой зонд, т.к это может привести к ожогам кожи. Медленно передвигайте зонд во время работы устройства.
 - (2) Применять устройство на том же участке коже следует не раньше чем через 5 часов после предыдущего сеанса.
 - (3) Если вы обнаружили неисправности во время работы устройства, отключите его от источника питания и обратитесь к производителю.
 - (4) Ознакомьтесь с подробной инструкцией по эксплуатации, т.к каждое устройство имеет свои индивидуальные особенности в работе.
 - (5) Нанесите достаточное количество геля на телоперед применением ультразвукового зонда. Чрезмерно малое количество геля уменьшает эффективность действия устройства
 - (6) Во избежание перегрева устройства повторное применение разрешено только после отключения устройства на 10 минут
 - (7) Использовать устройство следует только в присутствии специалиста
 - (8) Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием устройства
 - (9) Ультразвуковой зонд очень хрупкий, будьте осторожны в использовании во избежание физических повреждений
- 2) Перед применением устройства необходима консультация с врачом следующим людям:
 - (1) Лица, использующие имплантируемое электрическое медицинское оборудование, стимулирующее работу сердца
 - (2) Лица, использующие мед. Оборудование для искусственного кровообращения
 - (3) Лица, использующие ЭКГ
 - (4) Лица, страдающие кожными заболеваниями:
 - Покраснения кожи вследствие солнечных ожогов
 - Заболевания акне и участки кожи пострадавшие вследствие воспалительных процессов акне
 - Кожа с повышенной чувствительностью на аллергические реакции
 - Участки кожи с повышенной чувствительностью на косметические средства
 - Участки кожи, сопровождающиеся зудом, пигментными пятнами и другими повреждениями, вызванными физическим воздействием
 - Участки кожи с травмами, переломами, опухолями; геморрагические области, веки, черепная часть, рот, половые органы и области с инфекционными заболеваниями
 - (5) Кормящие матери, младенцы
 - a) Меры предосторожности
 - Применять устройство только по назначению, применение в других целях может стать причиной несчастного случая
 - Не использовать лицам, страдающим параличом и другими заболеваниями, ограничивающими движения
 - Запрещено одновременное использование с другими электрическими приборами
 - Не использовать устройство в ванных комнатах и других помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в пыльных помещениях
 - Если устройство не использовалось в течение длительного времени, убедитесь в его исправности перед повторным использованием
 - Соблюдайте дистанцию с другими электрическими приборами
 - Не используйте одну розетку для работы нескольких приборов
 - Не повреждайте устройство металлическими другими твердыми предметами
 - Не ставьте на поверхность корпуса тяжелые предметы и сосуды с водой
 - Не подключайте и не используйте другое оборудование, не предназначенное для данного устройства, за исключением комплектующих устройств
 - b) Хранение и уход за устройством
 - 1) После использования извлеките шнур питания из розетки
 - 2) Не храните устройство во влажных помещениях и вблизи огня
 - 3) Хранить в сухом недоступном для детей месте
 - 4) Не хранить и не использовать в местах с магнитными и электромагнитными волнами
 - 5) Не теряйте комплектующие устройства



Медицинская лицензия

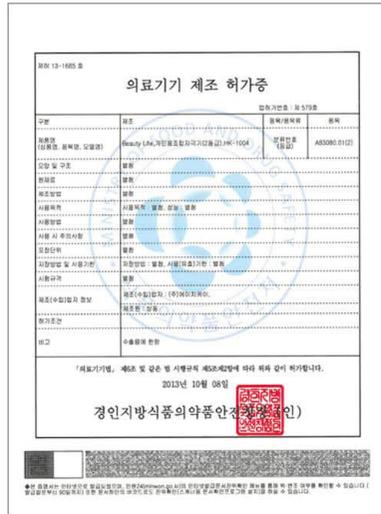

Свидетельство



Гарантия качества

◆ Гарантия качества ◆

[HK-1004 Красота и система оздоровления]

Гарантийный срок	1 год с момента приобретения		
Дата приобретения	ДД	ММ	ГГ
Покупатель	адрес :		
	Ф.И.О. :		
	Номер тел. :		
агентство	агентство :		
	покупателя :		
	адрес :		
Номер тел. :			

1. Данная продукция выпускается с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.
2. неисправность, возникшая при нормальном использовании подлежит к гарантийному ремонту в течение 1 года с момента приобретения в соответствии с законом «О защите прав потребителей»
3. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру или в отдел обслуживания клиентов.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения:
 - ① Повреждения, вызванные неправильным использованием, небрежным обращением пользователя
 - ② Повреждения вызванные самостоятельным ремонтом, не производителем данного изделия
 - ③ Повреждения вызванные механическим воздействием (удар, падение) на продукцию
 - ④ в случае потери данного сертификата качества
 - ⑤ В случае отсутствия в данном сертификате даты приобретения, штампа начальника агентства
 - ⑥ В случае повреждения изделия ,номер изготовителя на гарантийном талоне



BeautyLife

Beauty & Health Care

HK-1004

Красота и система оздоровления

[Изготовитель]

 **HK Co.,Ltd.**

<http://www.hkmedical.co.kr>

[Продавец]

