

Руководство пользователя

Данное руководство пользователя считается также сертификатом соответствия качества. Будьте внимательнее при его хранении.

ТЕПЛОВОЙ ПОЯС

Модель: НК-200



ООО Нью-Лайф Медикал

| Приветствие

Компания «НК Ко Лтд» основана в 1993 г. Обладая высоким потенциалом в области производства и совершенной технологией, компания поставляет свои изделия в внутри Кореи, а также осуществляет свои поставки в зарубежные страны. Компания успешно работает в области домашней медтехники. Президент компании «НК Ко Лтд» и его команда поставили перед собой цель-стать главным центром на мировом рынке медтехники. Для этого компания использует новейшие достижения в области медицины и техники, но при этом не забывает о традициях корейского народа. В данный момент компания НК Ко ЛТД активно продвигает свою продукцию на российский рынок.

С помощью развития медицинской науки мы смогли достичь своей мечты-продлить среднюю продолжительность жизни человека, однако при этом всегда находились в поисках основных причин заболеваний и методов профилактики, в этой связи наша команда лаборантов научно-исследовательского института, базируясь на явлениях природы, поставила перед собой задачу найти «силу самоисцеления» и разработать совершенный медицинский прибор. Длительное время команда выполняла исследовательскую и экспериментальную работу, в результате которых смогла разработать нанотехнологию, синтезируя понятие “улучшение конституции организма человека” из корейской традиционной медицины и самую передовую технологию из западной медицины, что максимально увеличила анионы и улучшила проникаемость длинноволнового инфракрасного излучения в медицинских приборах.

Ли Дже Бонг, Генеральный директор НК Ко Лтд



| Содержание

- 04 Спецификация продукции
- 05 Особенность продукции
- 06 Свойство керамики
- 07 Эффект пирамиды и Хираньи(P+N)
- 08 Длинноволновые инфракрасные лучи и Анионы
- 09 Предостережение
- 10 Диагностика неисправностей
- 11 Сертификаты



| Спецификация продукции

Позиция	Спецификация продукции
Наименование	Тепловой пояс НК200
Номер сертификата безопасности	JH07637-11001
Габаритные размеры	AC 220V, 60Hz, 100W
Техника безопасности	Элеетропредохранитель, защита от перегрева, автоматическое отключение от питания при положении SENSOR OPEN и SHORT ,защита от повышенного напряжения
Изготовитель	Компания НК Ко Лтд
Страна-изготовитель	MADE IN KOREA
Дата изготовления	написана в сертификате соответствия

Описание деталей терморегулятора и их способ применения



· Включатель

включает/выключает(в положении ON/OFF) электропитание (автоматически отключается прибор через 13 часов)

· Рукоятка регулировки температуры

отрегулирует температуру функции подогрева, вращая ручку по часовой стрелке или против неё.

· Лампа индикатора

в рабочем состоянии она горит



① Подключите соединитель корпусной части к соединителю терморегулятор, точно следя за концами соединителей.

② Подключите терморегулятор к сети электропитания.

③ Запустите прибор, нажав на кнопку включателя.

④ Установите нужную температуру.(30°C - 70°C). Установленная температура может отличаться от показываемой температуры на панели дисплея терморегулятора от действительной температуры на поверхности терморегулятора в зависимости от температуры окружающей среды)

⑤ Для безопасности терморегулятор автоматически отключается через 13 часов работы.

⑥ Для предотвращения искусственного внесения изменения в температуре действует функция удерживания(hold).

⑦ При переустановки температуры нажмите 1 раз на кнопку «регулировка температуры», в течение 3-х секунд установите новую температуру(по истечению 3-х секунд температура заново зафиксирована)

⑧ Для отключения электропитания, нажмите кнопку и удерживайте более 2 секунды.

| Особенность продукции

- ▼ ТЕПЛОВОЙ ПОЯС с PHE керамикой, испускающая тепло и сверхдлинные волны, изготовлена из Нано Ки(энергия) керамики. Керамика состоит из природных минералов, измельченных до размера микрочастиц при помощи нано технологии и испеченной при температуре 1300. «Керамика» спроектирована с учетом вида пирамиды и Хираण्या для излучения дальних инфракрасных лучей. «Керамика» улучшает кровообращение во всем организме.
- ▼ «Керамика» содержит 6 минералов в оптимальных пропорциях и выпускает обильное количество анионов и дальнего инфракрасного излучения. Во всех электрогрелках нашей компании использованы без магнитные нагревательные кабели, что дает возможность использовать их безопасно. «Керамика» собирает ауру(энергию) Вселенной которой пропитывает все человеческое тело и таким образом эффективно снимает усталость. «Керамика» собирает ауру(энергию) Вселенной которой пропитывает все человеческое тело и таким образом эффективно снимает усталость. Тепловой пояс НК200 возможно использовать долго и гигиенично, так как шестиугольные керамики плотно приклеены и инородные вещества не могут попасть в зазор между керамикой. Тепловой пояс НК200 выполнена из двух цветов для придания изящества.
- ▼ При использовании этого пояса дальние инфракрасные лучи и различные отрицательные ионы воздействуют на поясничный отдел. Помогает людям, которые ощущают частые боли и холод в области поясницы и живота, пояс эффективен при нерегулярных менструациях, запорах и диарее.



| Свойство керамики

С помощью нанотехнологий природные натуральные материалы измельчаются до наносостояния, полученное сырье проходит обжиг при температуре свыше 1300°C, после чего получается нанокерамика “Чи”, с помощью которой разработан прибор (НК--) с излучением длинноволнового инфракрасного света в сочетании форм” Хиранья “и формы” Пирамиды”.



Научная формула особенность керамики(PHNT)



Энергия “Чи” -пирамиды

+



энергия” Хиранья”-шестигранника

=



кристалл технологии НК(NT)

1. Лучшая нанокерамика, разработанная нами это сочетание энергии Хиранья-шестигранника и передовой технологии компании НК(NT) по принципу « энергии пространства пирамиды» и энергии “Чи“, образуемая из “Вершины треугольника”.
2. В плоскости пирамиды содержится поверхность Хиранья, которая преобразуется энергией пирамиды в пространстве. С помощью науки эти свойства стали керамикой, т.е. НК-нанокерамикой(PHNT).


| Эффект пирамиды и Хираньи(Р+Н)

1. Эффект пирамиды(Р)


- Энергия пирамиды восстанавливает лезвие бритвы.
- Пирамида меняет молекулярную структуру воды на шестигранную.
- Пирамида способствует прорастанию и росту семян.
- Пирамида предотвращает гниение и превращает молоко в йогурт или сыр.
- Медитация или сон внутри пирамиды способствует заряду энергии.

2. Эффекты Хираньи(Н)

- Хиранья ускоряет рост растений.
- Молоко, поставленное на верхушке Хиранья не портится, а только обезживается.
- Наверху Хиранья прекращается возникновение плесени или бактерий, которые способствуют порчи.
- Улучшает концентрацию.
- Способствует позитивному и активному мышлению.
- Улучшает вкус пищи.

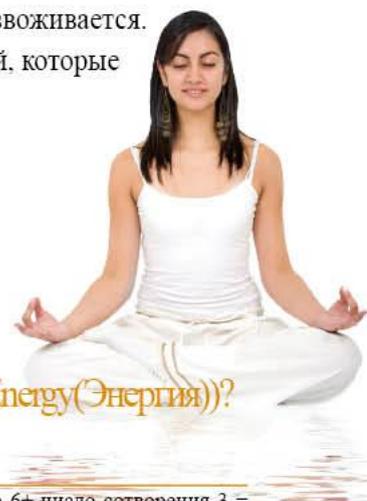

Что это такое РНЕ(Ругамид(Пирамида) + Ниганья(Хиранья) + Энергия(Энергия))?

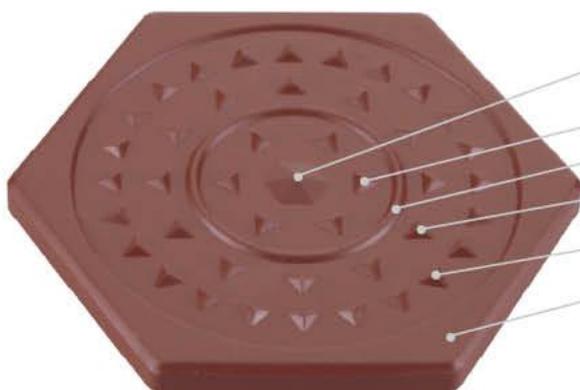

Человек(совершенное число 6+ число сотворения 3 = сочетание духовного мира человека и материального мира)

Ын, Ян(6 пирамид)

У Син(Пят элементов(кругов))

12 Знаков китайского зодиака(12 пирамид)

24 сезонов(24 пирамид)

Пространство космоса (Большой круг)

1. Шестигранный рог (символизирует человека): шесть треугольных пирамид визуализируют форму Хиранья, засчет которого Энергия Вселенной конденсируются и распространяется.
2. Шесть треугольных пирамид (Инь, Янь): Инь (печень, сердце, селезенка, легкие, почки, перикарда = шесть органов)+Янг (желчный пузырь, тонкая кишка, желудок, толстая кишка, мочевого пузырь и матка = шесть внутренностей).
3. Круг (У-Син: пять элементов): Янг (воскресенье), Инь (понедельник), пять элементов (вторник, среда, четверг, пятница, суббота).
4. 12 треугольных пирамид: означают знаки китайского зодиака.
5. 24 пирамиды треугольной формы: означают 24 сезона.
6. Большой Круг: символизирует пространство большого космоса.

※ РНЕ Керамика является керамикой, спроектированной для получения Энергии из пространства большого космоса в солнечную систему, и затем с солнечной системы в человека.

Длинноволновые инфракрасные лучи и Анионы

1. Длинноволновые инфракрасные лучи(ДИКЛ)




Длинноволновое инфракрасное излучение является самой длинной и полезной волной из всех “красных” цветов. Оно излучает волну в диапазоне от 8-11 мкм, проходит через тело человека на глубину от 7-8 см, при этом возникает эффект резонанса в клетках, согревается тело человека, стимулируется кровообращение, усиливается обмен веществ и увеличивается регенерация тканей.

2. Анионы



Анионы являются воздушными витаминами, их целебные свойства это нейтрализация крови, повышение силы сопротивления и способность дарить приятное чувство прохлады пользователю при повышенной температуре тела во время болезни

3. Применение безмагнитные нагревательных кабелей

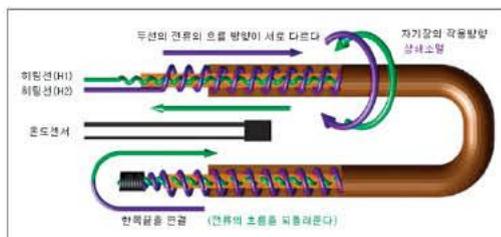

Данный аппарат разработан нами с применением безмагнитных нагревательных кабелей .-, что делает прибор более защищенным от воздействия электромагнитного излучения.



| Предостережение

В целях безопасности перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящее предостережение. Повреждения и неисправности вызванные небрежным обращением пользователем не подлежат гарантийному обслуживанию и за них компания-изготовитель и дилер не обязаны нести ответственность .



① Держите корпусную часть и терморегулятор подальше от влаги (вода, жидкость).



② Не допускайте сильных ударов по корпусной части терморегулятора и не ставьте тяжелые вещи на корпусную часть и терморегулятор.



③ Не позволяйте детям и пожилым людям самостоятельно работать с прибором.



④ Не разбирайте терморегулятор самостоятельно.




⑤ Перед эксплуатацией терморегулятор вынуть из чехла.



⑥ Не допускайте механические повреждения (царапины, порезы) острыми предметами, такими как нож, гвоздь, ножницы.



⑦ Не допускайте чтобы дети прыгали и бегали по корпусу пульта.

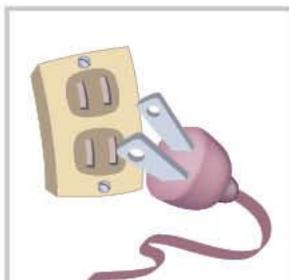

⑧ При длительном перерыве в пользовании нужно отключить от сети электропитания

Во избежание несчастных случаев внимательно изучите инструкцию по применению..



Диагностика неисправностей

▶ Правило хранения и ухода за прибором(НК200)

1. После работы нужно отключить терморегулятор от сети электропитания. Упаковать терморегулятор отдельно.
2. После работы нужно зачехлить корпусную часть в целях защиты от повреждения.
3. При перемещении необходимо упаковать все детали.
4. Храните в сухом помещении

▶ О модификации прибора (НК200)

1. Отключить прибор от сети электропитания.
2. При неисправности самим не разбирать, не ремонтировать, а немедленно связаться с Дилером или Сервисным центром компании-изготовителя.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора.
4. При повреждении электропроводов ,замену осуществляет изготовитель или специалисты в Сервисном центре изготовителя.

▶ Правило хранения или условий хранения

1. Хранить в сухом помещении.
2. Хранить в проветриваемых помещениях.
3. Не допускать прикосновения прибора с металлом.

Признаки неисправностей	Причина неисправности	Меры устранения
Температура корпусной части медленно поднимается.	<ol style="list-style-type: none">1. При начале эксплуатации прибора2. После длительного перерыва в пользовании3. При плохом соединении соединителей4. После выключения таймера	<ol style="list-style-type: none">1. Не использовать прибор 1-2 дня. После включить, поставив ручку регулировки температуры на « максимум», тогда температура автоматически поднимется до максимальной2. Отсоединить соединитель и заново соединить его3. Убедитесь в том, горит лампа «функция подогрева».
При использовании не работает функция «подогрев»	<ol style="list-style-type: none">1. При воздействии удара на аппарат или поврежден регулятор.2. При неплотном соединении на соединительной панели терморегулятора.3. При повреждении корпусной части	<ol style="list-style-type: none">1. Поставьте выключатель питания в положение OFF, затем верните выключатель в положение ON.2. Убедитесь в том, плотно ли подключен соединитель регулятор к соединителю корпусной части.3. Немедленно обращайтесь в Службу клиентской поддержки в компании-изготовители или в Дилер или в Сервисный центр.
В случае, когда высветиться "Er" на панели дисплея терморегулятора.	<ol style="list-style-type: none">1. При разрыве в проводов сенсора или соединителей.	<ol style="list-style-type: none">1. Обращайтесь в Сервисный центр

| Сертификаты

