



Тепловой аппарат «Светлячок» НК-7700

Тепловой аппарат «Светлячок» с nano керамикой и лазером – источник длинноволнового инфракрасного излучения, помогает улучшить кровообращение и облегчить мышечную боль. Компактный, умещается в одной руке.



ООО Нью Лайф Медикал

Тепловой аппарат с лазерным лучом НК-7700




Технические особенности

Позиция	Спецификация продукции
Наименование	Тепловой аппарат «Светлячок»
Модель	НК-7700
Напряжение	220V
Частота	60Hz
Расход эл. Энергии	24W
Контрольная модель	НК-SMART 100
Предохранительное устройство	Функция предотвращения перезагрузки FUSE
	Защита от перегрева
	Функция автоматического отключения
	Защита от высокого напряжения
Страна производитель	MADE IN KOREA
Изготовитель	HK Co.,Ltd.

Лазерный диодный проектор

Длина волны	655nm
Выходная оптическая мощность	<2.5 ±0.5mW
Диаметр луча	φ15 ± 2mm (@30Cm)
Входное напряжение	DC 3 ~ 3.5V
Рабочий ток (Макс.)	<40mA
Рабочая температура	-10~+50°C (Case Tem.)
Температура хранения	-20~+60°C
Материал корпуса	Brass Латунь/медь
Безопасность лазера	Class III a

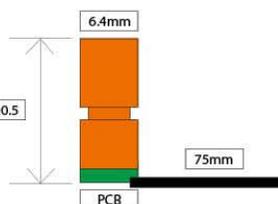

Тепловой аппарат «Светлячок» НК-7700

Инструкция применения

① Кнопка питания	включение/выключение питания (питание отключается после 8-ми часов работы)
② Кнопка регулирования	∇ : Понизить температуру ∧ : Повысить температуру
③ Дисплей температуры	Отображение установленной температуры
④ Лампа нагрева	Загорается при нагреве устройства
⑤ Лазерный индикатор	Загорается при работе лазера

- Подключите кабель питания к розетке.
- ① Нажатием на кнопку питания включите устройство.
 - На дисплее отобразится текущая установленная температура
- [блокировка] Устройство автоматически блокируется спустя 10 секунд бездействий.
 - При блокировки кнопки не функционируют.
- [разблокировка] Для разблокировки удерживать кнопку питания в течении 1 секунды
 - Все кнопки регулирования начнут функционирование.
- ② Нажатием на кнопки регулирования температуры устанавливается необходимая температура.
 - температура может быть установлена от 30 до 70°C
 - Автоматически выключается после 8 часов работы.
- Для работы лазера нажмите на кнопку питания еще раз
 - ③ На дисплее отобразится время работы лазера (30 мин.).
 - После 30 минут работы лазер автоматически отключается
- По завершению использования устройства отключите проектор нажатием на кнопку питания.

Нано керамические вставки



Лазерный диодный луч



Чехол



Тепловой аппарат «Светлячок» с нано керамикой и лазером – источник длинноволнового инфракрасного излучения, помогает улучшить кровообращение и облегчить мышечную боль. Компактный, умещается в одной руке.



Тепловой аппарат
«Светлячок»
НК-7700

Меры предосторожности

1. Беречь от влаги корпус и регулятор устройства.
2. Беречь от ударов и падений.
3. Не использовать самостоятельно детям и пожилым людям.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
5. Держите регулятор на видном месте.
6. Избегать прямого попадания лучей лазера в глаза.
7. Применение высокой температуры (от 45°C) в течение длительного времени, может привести к ожогам.
8. При возникновении дискомфорта или болевых ощущений после применения устройства, прекратить использование устройства.
9. Используйте устройство в рамках указанного в инструкции времени.
 - Не больше 8-ми часов в день, а при использовании высокой температуры не более 1 часа в день.
10. Не использовать в иных целях, кроме указанных в данной инструкции.
11. С осторожностью использовать лицам, страдающим кожными заболеваниями, ранами, а также лицам с чувствительной кожей.
12. Не использовать лицам в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам с повышенной утомленностью.

Условия хранения

1. Если вы не используете устройство, отключите устройство от источника питания.
2. Хранить в сухом месте при комнатной температуре.
3. Беречь вдали от огня и влаги.
4. При загрязнении протирать мягкой сухой салфеткой.
5. Не повреждать ножом или другими острыми предметами.
6. В случае поломки немедленно прекратить использование устройства и обратиться в место покупки или сервисный центр.

Особенности устройства

1. Лечение лазером малой мощности и прогревание.
2. Устройство разработано с учетом удобства использования для потребителя.
3. Устройство предназначено для лечения не только коленных, плечевых и тазобедренных суставов, но также и для лечения глаз, носа, ушей и половых органов.
4. Прост в использовании и управлении даже для людей пожилого возраста.

Использование лазера для лечения

1. Удаление воспаления поврежденных хрящевых клеток .
2. Активизация и восстановление клеток .
3. Устранение воспалений, облегчение боли путем контроля нервной системы.
4. Путем нарастания коллагена предотвращает износ хрящевой ткани.

Длинноволновые инфракрасные лучи(ДИКЛ)

Длинноволновое инфракрасное излучение является самой длинной и полезной волной из всех “красных” цветов Оно излучает волну в диапазоне от 8-11 мкм, проходит в тело человека на глубину от 7-8 см, возникает эффект резонанса в клетках, согревается тело человека, стимулирует кровообращение, усиливается обмен веществ и увеличивается регенерация тканей.

Анионы

Анионы именуются воздушными витаминами, их целебными свойствами являются обогащение крови кислородом повышение силы сопротивления и способность дарить приятное чувство прохлады пользователю при лечении с высокой температурой.

Тепловой аппарат «Светлячок» с nano керамикой и лазером – источник длинноволнового инфракрасного излучения, помогает улучшить кровообращение и облегчить мышечную боль. Компактный, умещается в одной руке.



Особенности и эффективность nano керамики

Состав – это природные минеральные камни обработаны по специальной nano технологии.

- Излучение отрицательных ионов и длинноволновых инфракрасных лучей.
- Улучшает кровообращение и облегчает боль.




Полезные свойства лазера

1. Обеспечивает формирование клеток и поступление энергии в органы.
2. Устраняет воспаление и активизирует клетки.
3. Воздействует полностью на все тело и сдерживает химический дисбаланс.
4. Стабилизирует клеточную оболочку и поддерживает оптимальное функционирование клеток.
5. Стимулирует гормональную секрецию гистамин и серотонин, что способствует облегчению воспалений.

Применение на различных частях тела

Глаза	Снятие усталости, пониженное зрение
Нос	Ринит, синусит
Подбородок	Болезнь челюстного сустава, вызванное воспалением
Горло	Миндалины, диск
Плечо	Боль, плече-лопаточный периартрит
Брюшная область	Спазмы, ощущение холода в брюшной области, абдоминальное ожирение.
Спина	Межпозвоночные диски
Колени	Артрит
Анальное отверстие	Геморрой, предстательная железа
Другое	Руки, ноги, пальцы рук и ног, бедро и т.д.

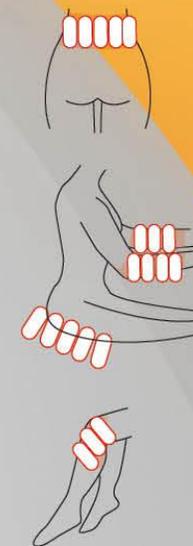

Рекомендуется к применению лицам со следующими болезнями:

- Спазмы, проблемы с кожей, угревая сыпь, боли в брюшной области.
- Выпадение волос, заболевание предстательной железы, простатит, половые болезни.
- Боли в плечах, в мышцах, атрофия, абдоминальное ожирение Проблемы щитовидной железы.

◆ Гарантийный талон ◆

Гарантийный срок	Тепловой аппарат «Светлячок» НК7700		
Дата приобретения	дд	мм	гг
Покупатель	адрес :		
	Ф.И.О. :		
	Номер тел. :		
агентство	агентство :		
	покупателя :		
	адрес :		
	Номер тел. :		

1. Данная продукция выпускается с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.
2. Неисправность возникшая при нормальном использовании подлежит гарантийному обслуживанию в течении 1 года с момента приобретения в соответствии с законом "О защите прав потребителей"
3. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру или в отдел обслуживания клиентов.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения:
 - Повреждения вызванные неправильным использованием, небрежным обращением пользователя
 - Повреждения вызванные самостоятельным ремонтом не производителем данной продукции
 - Повреждения вызванные механическим воздействием (удар, падение) на продукцию
 - В случае потери данного гарантийного талона
 - Если отсутствует в гарантийном талоне дата приобретения, подпись и печать Дилера
 - Если отсутствует номер изделия на гарантийном талоне повреждения изделия ,номер изготовителя на гарантийном талоне

[Изготовитель]

 **НК Co.,Ltd.**

<http://www.hkmedical.co.kr>

[Продавец]

 **ООО Нью Лайф Медикал**

адрес : Россия, Приморский край, г. Уссурийск ул.
Беляева 13.

Эл. почта : nl_med@mail.ru

Номер тел : 8(4234)33-05-94

Сайт : <http://www.nl-med.ru>