

Оздоровительная подушка с массажем

НК-7500

Ортопедическая подушка обеспечивает глубокий сон, снимает усталость, что способствует естественному оздоровлению и улучшению здоровья.



ООО Нью Лайф Медикал

Оздоровительная подушка с массажем НК-7500



Способ применения и технические особенности

Позиция	Спецификация продукции
Название	Ортопедическая подушка
Модель	НК-7500
Напряжение	AC 100~240V, 50~60Hz DC 5V , 1A(=1000MA)
Расход эл.энергии	1.5W
Страна производитель	MADE IN KOREA
Изготовитель	НК Co.,Ltd.

Способ применени

1. Подключите шнур питания к корпусу и присоедините устройство к источнику питания.
2. После присоединения к источнику питания устройство начнет работу.
3. Время работы устройства – 30 мин., по истечению 30 минут устройство выключается автоматически.
4. Для повторной работы устройства, отсоедините устройство от источника питания и присоединить Вновь.
5. После использования устройства извлеките шнур питания от корпуса

Меры предосторожности

1. При уходе за устройством предварительно убедитесь, что устройство не подключено у источнику питания.
2. Беречь от влаги
3. Не прокалывать и не царапать устройство ножом или другими острыми предметами
4. Не разбирайте устройство
5. Извлеките шнур питания из корпуса, если устройство не используется
6. Не ставьте тяжелые предметы и берегите устройство от повреждений

Применение на различных частях тела



Оздоровительная подушка с массажем НК-7500



Особенности ортопедической подушки

1. Форма подушки спроектирована в соответствии с эргономическими науками, таким образом
 - давление распределено равномерно, что позволяет оптимальным образом поддерживать шейные позвонки.
2. Применение природных минералов и нано керамики.
 - природные минералы и нано керамика излучают отрицательные ионы и инфракрасное излучение, что способствует хорошему кровообращению.
3. Мягкий вибрирующий массаж шеи.
 - Благодаря массажу в области сонной артерии улучшается и нормализуется сон.



Оздоровительная подушка предотвращает деформацию шейных позвонков, выделяет большое количество инфракрасных излучений и отрицательных ионов, мягко массирует, тем самым улучшая кровообращение и качество сна.

Эргономические показатели

Ортопедическая подушка

Специальная форма подушки, разработанная в соответствии с эргономическими науками, что позволяет оптимальным образом распределить давление и предотвратить деформацию шейных позвонков. Лёгкий вибромассаж в области сонной артерии улучшает кровообращение и обеспечивает глубокий сон.

Обычная подушка.

Форма обычной подушки не учитывает особенности строения человеческого тела, следовательно, давление распределено неравномерно, что может привести к деформации шейных дисков.

Особенность подушки


- Давление на нервы в области шейных позвонков



1. Отдышка, ожирение
2. Головная боль, головокружение, высокое давление, болезни глаз
3. Заложенность носа, ринит, миндалины
4. Воспаление среднего уха, слабый слух, болезни горла
5. Фарингит, храп
6. Хронический кашель, ангина, боль в области мышц шеи
7. Щитовидная железа, простуда



Оздоровительная подушка с массажем НК-7500

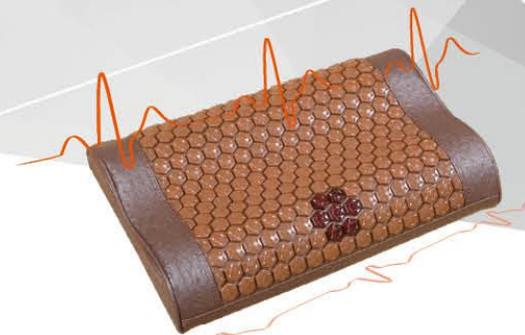

Длинноволновые инфракрасные лучи(ДИКЛ)

Длинноволновое инфракрасное излучение является самой длинной и полезной волной из всех "красных" цветов. Оно излучает волну в диапазоне от 8-11 мкм, проходит в тело человека на глубину от 7-8 см, возникает эффект резонанса в клетках, согревается тело человека, стимулирует кровообращение, усиливается обмен веществ и увеличивается регенерация тканей.

Анионы

Анионы именуются воздушными витаминами, их целебными свойствами являются обогащение крови кислородом, повышение силы сопротивления и способность дарить приятное чувство прохлады пользователю при лечении с высокой температурой.

Мягкий вибромассаж

Мягкий вибромассаж во время сна

- Массаж шейных позвонков, эффект мануального массажа
- Улучшение кровообращения в области сонной артерии, стимуляция глубокого сна

Рекомендуется следующим лицам:

- Лицам, страдающим бессонницей и хронической усталостью.
- Людям с проблемами кровообращения.
- Современным людям часто подвергающимся стрессу.
- Может послужить отличным подарком для родителей.
- Людям, страдающим от дискомфорта в области шеи из-за проведения длительного времени за компьютером или телефоном.

Полезные свойства нано керамики

1. Природные минеральные вещества обработаны по специальной нано технологии.
 - Излучение отрицательных ионов и инфракрасных излучений.
 - Улучшает кровообращение и глубокий сон.
2. Керамические элементы в форме пирамиды сохраняют тепло.
 - в зависимости от изменения температуры, цвет керамики меняется с максимальным инфракрасным излучением.



◆ Гарантийный талон ◆

Гарантийный срок	Оздоровительная подушка с массажем		
Дата приобретения	дд	мм	гг
Покупатель	адрес :		
	Ф.И.О. :		
	Номер тел. :		
агенство	агенство :		
	покупателя :		
	адрес :		
	Номер тел. :		

1. Данная продукция выпускается с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.
2. Неисправность возникшая при нормальном использовании подлежит гарантийному обслуживанию в течении 1 года с момента приобретения в соответствии с законом "О защите прав потребителей"
3. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру или в отдел обслуживания клиентов.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения:
 - Повреждения вызванные неправильным использованием, небрежным обращением пользователя
 - Повреждения вызванные самостоятельным ремонтом не производителем данной продукции
 - Повреждения вызванные механическим воздействием (удар, падение) на продукцию
 - В случае потери данного гарантийного талона
 - Если отсутствует в гарантийном талоне дата приобретения, подпись и печать Дилера
 - Если отсутствует номер изделия на гарантийном талоне повреждения изделия ,номер изготовителя на гарантийном талоне

[Изготовитель]

 **HK Co., Ltd.**

<http://www.hkmedical.co.kr>

[Продавец]

 **ООО Нью Лайф Медикал**

адрес : Россия, Приморский край, г. Уссурийск ул. Беляева 13.

Эл. почта : nl_med@mail.ru

Номер тел : 8(4234)33-05-94

Сайт : <http://www.nl-med.ru>

